

# 在宅用1+1モーターベッド

PKB-735, 750, 760 PRB-1035, 1050, 1060

# 【取扱説明書】







PKB-760, PRB-1060

この度は、在宅用1+1モーターベッドをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。 この取扱説明書は、組み立て、ご使用の前に必ずお読み頂き、正しくご使用頂きますようお願い致します。


- ●介護が必要な方がお使いになる場合は、介護される方もこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
- ●この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管して下さい。
- ●製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し下さい。
- ●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または弊社まで、お問い合わせ下さい。

### 株式会社プラッツ

もくじ
安全にご使用いただくために・・・・・・・・・・②~④
部品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
主要部分の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⑦
ベッドの使用方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ベッドの組立方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オプション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(12)
非常用バッテリーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
故障かな・・・!? 点検・お手入れ・・・・・・・・・・・・ 値 商品の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<b>商品の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
<b>体証者</b>

### 商品の特長

- ●床面高を低床の22 cm・36 cmと、2段階に調整できます。
- ●リモコンのボタンを押すだけで、背上げのみ・足上げのみ・背足同時の操作ができます。
- ●モーターに非常用乾電池が付いており、万一の停電時にも背足を下げる事ができます。
- ●昇降機を後から取り付ける事ができます。

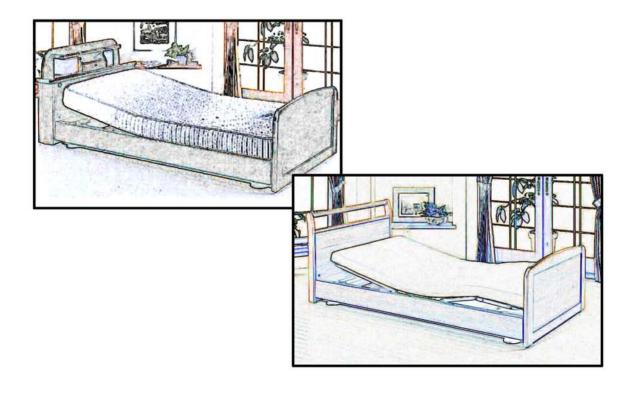

# 安全にご使用いただくために

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示とそれぞれの意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みいただき、正しくお使い下さい。



# 警告


この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




# 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### ■絵表示の例

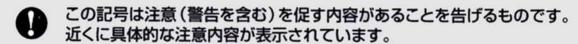


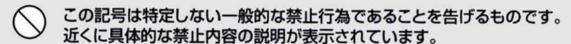

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図中または近くに具体的な禁止内容(分解禁止等)が表示されています。

在宅用1+1モーターベッドに関する警告及び注意

# ♪ 警告

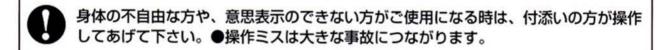

操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。●ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルの原因になります。

1 指づめにご注意下さい。

で使用になられる前に、各部ボルトが完全に固定されているか、ご確認下さい。 ●ボルトがゆるんでいると、ご使用中にパーツが外れたりすることも考えられ、 事故の原因になります。

# **企警告**



ベッドの上で飛びはねたり、ベッドの下にもぐり込まないで下さい。 ●ネット部分の損傷やフレームにはさまれる等の事故につながります。



背上げ、脚上げ箇所に物が挟まっていないか点検下さい。

●物が挟まったままの状態で稼動させますと、安全スイッチが働かず故障の原因になります。



モーターの長時間連続使用(5分以上)はなさらないで下さい。

●モーターの過熱により、火災や感電の原因になります。



ストーブなどの火気類をベッドに近づけ過ぎないで下さい。

●火災の原因になります。



電源コンセントは濡れた手で触らないで下さい。また、コードを抜く時は必ずコンセントを持って抜いて下さい。●感電等の危険があります。



雷が鳴った時はコンセントを抜いて下さい。

●感電の恐れがあります。



表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧では使用しないで下さい。

●火災や感電の原因になります。



ペースメーカーをご使用の方、電子機器による治療を行っておられる方は、 通常のベッドの使用には支障はきたしませんが、心臓部をモーターに 近づける様な事はしないで下さい。



水などの液体で、手元スイッチや駆動部を濡らさないで下さい。

●ショートして火災や感電の原因になります。



分解や改造はしないで下さい。

●火災や感電の原因になります。



背部フレームに腰かけたり、うつ伏せに寝ている状態でベッドを作動させないで下さい。

# **注意**



ベッドの下に物を置かないで下さい。

●作動不良によるトラブルの原因になります。



手元スイッチおよびコードの根元を極端に折りまげないで下さい。

●ショートの原因になります。




ベッドを2人以上でご使用にならないで下さい。



モーター作動中にテレビ等にノイズが発生することがございます。 予めご了承下さい。


# 部品の確認


- 開梱した時点で、下記の部品が全て同梱されているか、 また、破損していないか確認して下さい。 万一、部品の不足や破損があった場合は、販売店または弊社まで御連絡下さい。
  - 本体ユニット ……1 個 ※本体ユニットの組み立て方は、本体ユニットに 同梱している取扱説明書をご覧下さい。

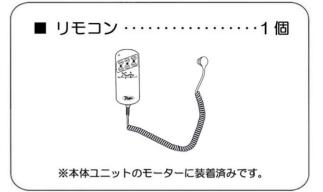


### PKB-735 • PRB-1035 仕様



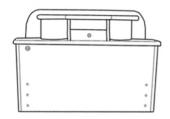


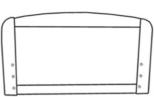


### PKB-750 - PRB-1050 仕様

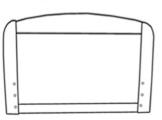




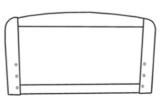

### PKB-760 • PRB-1060 仕様

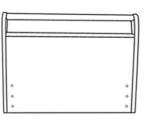




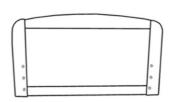

# 部品の確認

■ サイドフレーム ……左右各 1 本

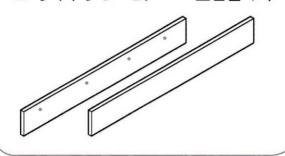


■ 取扱説明書・・・・・・・・・1 冊



■ヘッド・フットボード取付金具セット ・・・・・1セット

本体ユニットの梱包箱に同梱しています。

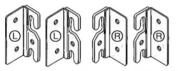

取付金具 · · · 左右各 2 個

取付ビス …8個

■ ヘッド・フットボード取付金具用 六角レンチ・・・1 個

本体ユニットの梱包箱に同梱しています。



■ サイドフレーム取付部品セット

・・・・・1 セット

本体ユニットの梱包箱に同梱しています。

0000 0000

ワッシャ ・・・8枚

9999 

ビス…8本

ナット…8個


■ サイドフレーム取付用スパナ・・・・ 1 個

本体ユニットの梱包箱に同梱しています。




■ 専用 16 cm厚マットレス · · · 1 枚

マットレスの梱包箱に入ってます。

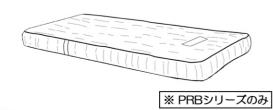

# 主要部分の名称

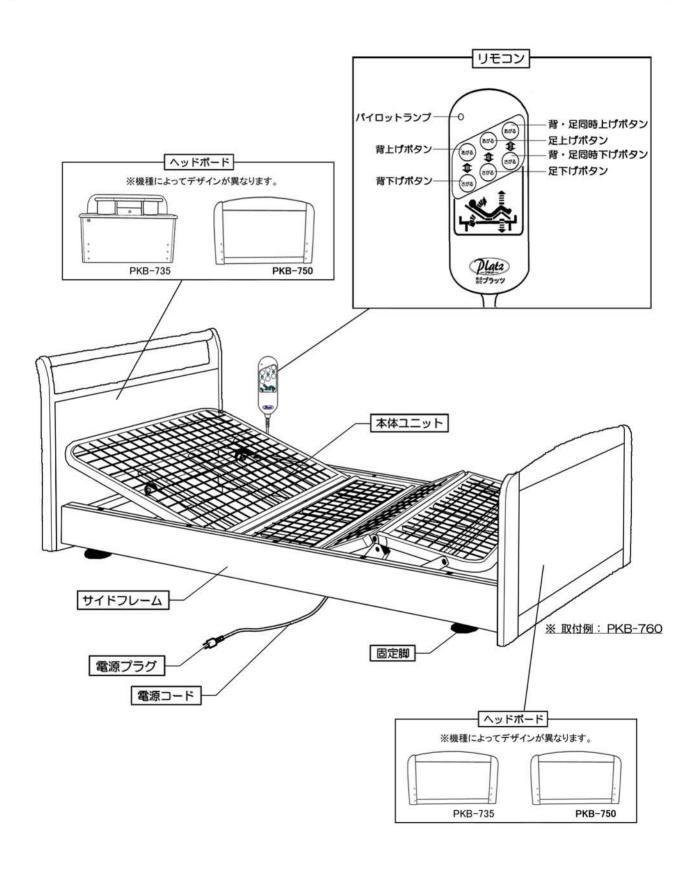


# ベッドの使用方法

# ♠ 警告

- ベッドを一定期間使用しない場合や、介護者が長時間ベッドから 離れる場合は、電源プラグを抜いて下さい。 誤操作による事故のおそれがあります。
- ① 電源を入れる。 (電源プラグをコンセントに接続して下さい。)
- 電源プラグ

- ② リモコンで操作する。
  - ●このリモコンは、電動無段階自在式の 3ポイント(背・足・背足同時)選択タイプです。
  - ●操作スイッチを押すと、パイロットランプが緑色に点灯します。


# ▲ 背 · · · 背部ネットの角度調節ボタン

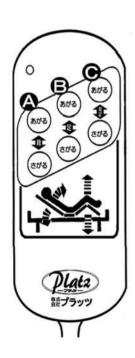




背部ユニットの角度を 75°(±3°)まで 無段階調節が出来ます。

### 母 足 ・・・ 足部ネットの角度調節ボタン

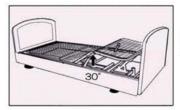

足部ユニットの角度を30°(±3°)まで 無段階調節が出来ます。

## ● 背足・・・背足部ネットの同時角度調節ボタン

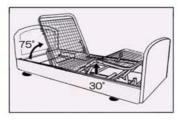

背足部ネットの角度を同時に 無段階調節が出来ます。

### 0

操作は必ずベッドに寝た状態で行って下さい。

ベッドに立った状態での操作は危険を伴うと同時に、モーターのトラブルの原因になります。

### ⚠ 注意

2つ以上のボタンを同時に押さないで下さい。 リモコンまたはモーターの故障の原因になります。

### たこ足配線はしないで下さい。


使用電源は家庭用 100 Vです。 たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

**注意** 




組み立ての際に、ユニットで手を挟まないようにご注意下さい。

① 組み立てた本体ユニットを水平な場所に置きます。

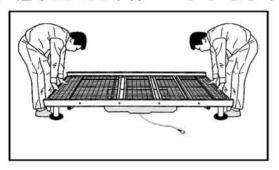


### お願い


- ●2人以上で行って下さい。
- ●ネットの部分だけを持って上げないで下さい。 (外枠が下に開き、落下して危険です。)
- ② 2本のサイドフレーム裏側の 4 箇所のビス取付穴に、サイドフレーム取付ビスを取り付けます。

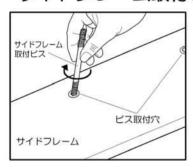


③ 2本のサイドフレームに取り付けたビスを、本体ユニット側面の 4 箇所のビス差込穴に差し込み、内側まで貫通させます。

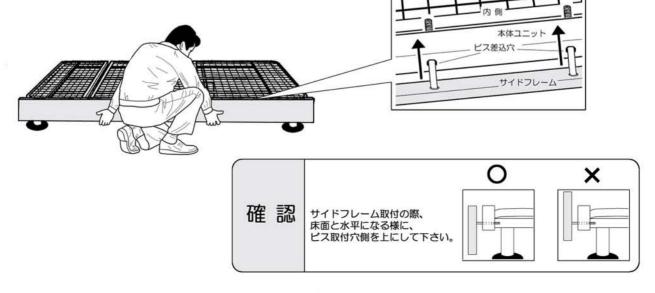


④ 一人が背ネットを、上に少し上げます。

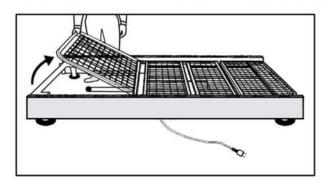


⑤ もう一人がサイドフレーム取付ビスにナットを取り付け、 スパナを使い固定します。

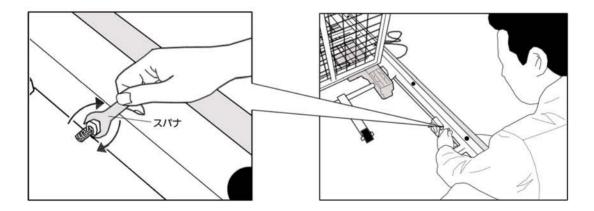


⑥ 足側も同様に固定します。

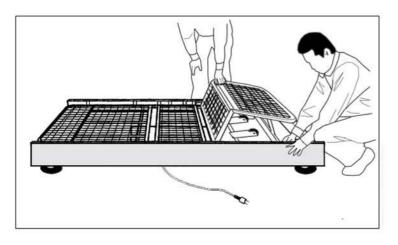


⑦ ヘッド・フットボードに取付金具を取り付けます。 六角レンチを使い、取付ビスで固定します。

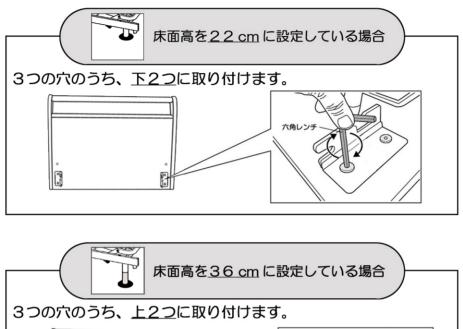


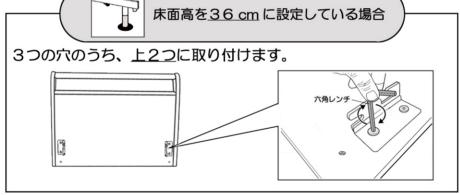


8 ヘッド・フットボードを本体ユニットの突起に引っかけます。

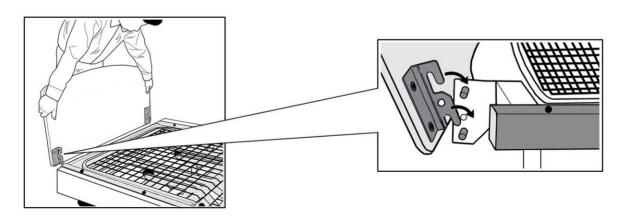

⑨ 回転ロックピンを回して押し込んで固定します。

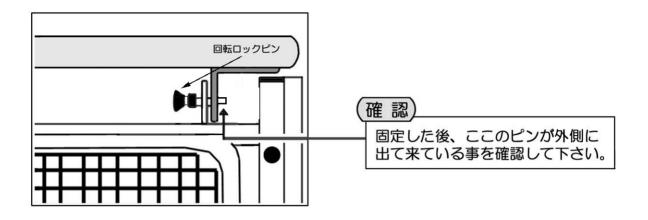


⑩ マットレスハンガーを取り付けます。

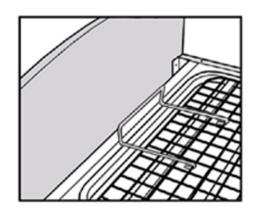


マットレスハンガーをフットボード側のネットに引っ掛けて取り付けます。

これで組み立て完成です。

# オプション

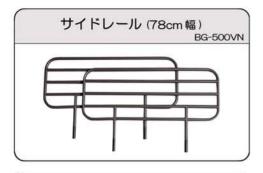


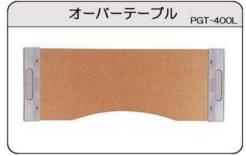





# マットレス ※ PKB-735,760 のみ ・ 褥瘡予防新世代マットレス・・・ PPM-9080S ・ 褥瘡予防新世代マットレス・・・ PPM-9080SB ・ ダブルポイントマットレス (90cm 幅) ・・・ PFM-8980PN ・ スタンダードマットレス (90cm 幅) ・・・ PBM-9180PN ・ 高級パームマットレス (85cm 幅) ・・・ PKB-M380 ・ 硬綿入マットレス (90cm 幅)・・・ PBM-M90

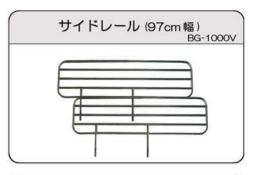









# 非常用バッテリーについて

この商品には、本体ユニットに装着済みのモーターに、停電時の非常時に備え、 非常用バッテリー(アルカリマンガン9V乾電池使用)が備わっておりますので、 停電時にリモコン操作で、背・足部を下げる事のみ出来ます。(上げる事は出来ません。)


### 確 認


コンセントを抜いたまま使用されますと、 電池より電気が供給されてしまい、 電池の交換が必要になります。

### お願い

出荷時に装着しております乾電池は、 テスト用のモニター電池です。 1~2回の使用しかできませんので、市販の乾電池を 予備として御購入下さい。

### 電池の交換方法

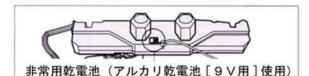


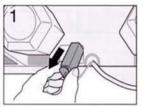


モーターユニットより 非常用乾電池を 取り出します。



コネクターを指でつまみ乾電池を外します。

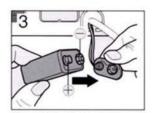

新しい乾電池を コネクターに取り付けます。 非常用乾電池 ① と ② を 正しくセットします。

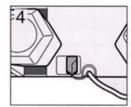

非常用乾電池を モーターユニットに 取り付けます。

### 故障かな・・・!?

### 下記項目で確認してください。

- ●電源プラグが抜けていませんか?
  - □ 電源プラグをコンセント(AC100V)に差し込んで下さい。
- ●電源プラグが破損していませんか?
  - ⇒販売店にご相談下さい。
- ●リモコンコードが抜けていませんか?
- ➡ リモコンのコネクターをモーターユニットの差込口に差し込んで下さい。
- ●停電してませんか?
- ●ブレーカーがとんでいませんか?

次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

	症状		対処方法	ページ
リモコン	緑ランプが	上ながら	<ul><li>●連続使用しましたか?</li><li>□トランス保護用の温度スイッチが働いた可能性があります。販売店にご相談下さい。</li></ul>	
リモコンスイッチを押	点灯する	下ながら	<ul><li>●モーターユニットの故障と思われます。</li><li>⇒販売店にご相談下さい。</li></ul>	
	緑ランプが	卡	●補助乾電池がありません。 □>9Vの補助乾電池を交換して下さい。	14)
しても動かない	点灯しない	しない	<ul><li>●モーターユニットか、リモコンが故障しています。</li><li>⇒販売店にご相談下さい。</li></ul>	
途	中で操作が停る	<b>₹</b> る	●ベッドの下や後ろに障害物がありませんか?  □ 障害物を取り除いて下さい。	

# 点検・お手入れ

- ●本体のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いて下さい。著しい汚れを落とす場合は、 薄めた中性洗剤をご使用下さい。
- アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないで下さい。
- ●ネジ類は、その取り付けが確実かどうか、時々点検して下さい。
- ●電動モーター周辺の駆動部は、時々ハケやブラシで掃除して下さい。



<i>∳</i> チェックメモ_		
-		

# 商品の仕様

	PKBシリーズ					
品名・品番	在宅用 1+1 モーターベッド PKB-735/750/760					
ベッド寸法	75.5/ 81.5cm 76/82 cm 76/82 cm 22/36cm 22/36cm PKB-735					
	75.5/ 81.5cm 22/36cm PKB-750 204.5cm 102cm					
商品梱包	PKB-7:本体ユニット部 (H/F):ヘッド・フットボード部 (S/F):サイドフレーム部					
梱包サイズ	PKB-7:2045 × 1040 × 200 60. 0kg(48. 0kg) PKB-735 (H/F):220 × 1130 × 850 20. 5kg(18. 5kg) (S/F):2000 × 165 × 80 8. 0kg(7. 0kg)  PKB-750 (H/F):120 × 1100 × 820 16. 5kg(14. 5kg) (S/F):2000 × 165 × 80 8. 0kg(7. 0kg)					
梱包重量 (本体重量)	PKB-7:2045 × 1040 × 200 60. 0kg(48. 0kg)  (H/F):170 × 1100 × 850 16. 5kg(14. 5kg)  (S/F):2000 × 165 × 80 8. 0kg(7. 0kg)					
11 1225	PKB-735       本体部:スチール         ウッド・フットボード部:パイン・プリント化粧合板       PKB-750         サイドフレーム部:プリント化粧合板       サイドフレーム部:桧(ひのき)					
材質	本体部:スチール PKB-760 ヘッド・フットボート、部:ポプラ・プリント化粧合板 サイドフレーム部:プリント化粧合板					
電動機能	無段階自在式 3ポイント選択タイプ 背上げ・足上げ背足同時連動					
床面形状	通風性に優れ、体にやさしくフィットするスチールメッシュ方式 床面形状は4ブロックに分けてあります。 背上げ角度 (0~75度 ± 3度) 脚上げ角度(0~30度 ± 3度)					
定格電圧	AC100V 50/60Hz					
定格消費電力						
モーターユニット	OKIN(ドイツ)製 (通産省乙種電気用品輸入承認済) モーター部に非常用電源(9V電池)使用					
定格使用時間	連続使用5分(一人での使用に限定)					
耐荷重	120kg					
原産国	本体:マレーシア モーター:ドイツ 木部:日本					
表示者	(株)プラッツ フリーダイヤル:0120-77-3433 (月曜~金曜 日祝日除く)					

# 商品の仕様

	PRBシリーズ					
品名・品番	マット付1+1モーターベッド	PRB-1035/1050/1060・・・・パームマット付 PRB-1035U/1050U/1060U・・・ウレタンマット付 PRB-1035L/1050L/1060L・・・ラテックスマット付				
ベッド寸法	75.5/ 81.5cm PRB-1035 219.5cm 55.5 81.5cm	76/82 cm 55.57 1060-35/55cm 55.57 1060-35/56 m 10601.37/51 cm 10601.37/51 cm 102 cm				
	PRB-1050 204.5cm					
商品梱包	PKB-7:本体ユニット部 (S/F):サイドフレー (H/F):ヘッド・フットボード部 マットレス:マットレス	-ム部 <部				
	PRB-1035   PKB-7:2045 × 1040 × 200   60. 0kg(48. 0kg)   (H/F):220 × 1130 × 850   20. 5kg(18. 5kg)   (S/F):2000 × 165 × 80   8. 0kg(7. 0kg)	ハ <sup>*</sup> ームマットレス: 1975 × 990 × 165 28.2kg (25.3kg) ウレタンマットレス: 1990 × 970 × 160 12.75kg (9.45kg) ラテックスマットレス: 1990 × 970 × 160 30.0kg (27.5kg)				
梱包サイズ 梱包重量 (本体重量)	PRB-1050   PKB-7:2045 × 1040 × 200   60. 0kg(48. 0kg)   (H/F):120 × 1100 × 820   16. 5kg(14. 5kg)   (S/F):2000 × 165 × 80   8. 0kg(7. 0kg)	ハ <sup>°</sup> ームマットレス: 1975 × 990 × 165 28.2kg(25.3kg) ウレタンマットレス: 1990 × 970 × 160 12.75kg(9.45kg) ラテックスマットレス: 1990 × 970 × 160 30.0kg(27.5kg)				
3939 - PARAGETT LONG 147.0	PRB-1060 PKB-7:2045 × 1040 × 200 60. 0kg(48. 0kg) (H/F):170 × 1100 × 850 16. 5kg(14. 5kg) (S/F):2000 × 165 × 80 8. 0kg(7. 0kg)	ハ <sup>°</sup> ームマットレス: 1975 × 990 × 165 28.2kg(25.3kg) ウレタンマットレス: 1990 × 970 × 160 12.75kg(9.45kg) ラテックスマットレス: 1990 × 970 × 160 30.0kg(27.5kg)				
	本体部: スチール PKB-735 ペッパ・フットボート・部: パイン・プリント化粧合板 サイドフレーム部: プリント化粧合板	パームマットレス: 表地: テトロン、コットン 芯地: 天然やし75%、天然ラテックス25%				
材質	本体部: スチール PKB-750 ペット・フットボート 部: 桧(ひのき) サイドフレーム部: 桧(ひのき)	ウレタンマットレス: 表地: ポリエステル55%、ポリファイル45% 芯地: ウレタン100% ラテックスマットレス: 表地: パイル				
	本体部: スチール PKB-760 ヘッド・フットボート 部: ポプラ・プリント化粧合板 サイドフレーム部: プリント化粧合板	芯地∶ラテックス、パ−ム				
電動機能	無段階自在式 3ポイント選択タイプ 背上げ・足上					
床面形状	通風性に優れ、体にやさしくフィットするスチールメッシュ方式 床面形状は4ブロックに分けてあります。 背上げ角度 (0~75度 ± 3度) 脚上げ角度(0~30度 ± 3度)					
定格電圧	育上げ角度 (0~75度 ± 3度)   脚上げ角度(0~30度 ± 3度)   AC100V   50/60Hz					
定格消費電力	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR					
モーターユニット	OKIN(ドイツ)製 (通産省乙種電気用品輸入承認済) モーター部に非常用電源(9V電池)使用					
定格使用時間	連続使用5分(一人での使用に限定)					
耐荷重	120kg					
原産国	本体・マットレス:マレーシア・ベトナム モーター:ドイツ 木部:日本					
表示者	(株)ブラッツ フリーダイヤル:0120-77-3433	(月曜~金曜 日祝日除く)				



●MEMO●		
v <u> </u>		
,		
,		



●MEMO●		
,		
,		
		-
,		
) <del>.</del>		
,		



●MEMO●		
v <u> </u>		
,		
,		

# **■アフターサービスについて**

お客様保管用です

- ●この電動ベッドには保証書を添付致しております。「販売店、購入日、お名前」等を記入した上で、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管しておいて下さい。
- ●保証期間はお買上げ日から1年間です。
- ●サービスをご依頼される前に、今一度この取扱説明書をよくお読み下さい。それでも異常がある場合は、上記フリーダイヤルへご相談下さい。その際製品名、故障内容をお申し付け下さい。
- ●その他のアフターサービスについてご不明な点がございましたら、当社または販売店へお申し付け下さい。 (平日AM 9:00~PM 5:00)



# 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は無料修理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して、修理をお受けになる場合には、お買上げの販売店にご依頼下さい。修理のさいには本書をご提示下さい。修理は極力、部品交換でお願いします。もし出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による 故障および損傷
  - (ロ) お買上げ後の落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧による故障及び損傷
  - (二) 一般家庭用以外に使用された場合の故障及び 損傷

- (ホ) 本書の提示がない場合
- (へ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名 の記入のない場合、あるいは字句を書き替え られた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に 保存して下さい。
- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店にお問い合わせ下さい。




## PKB-735,760 PRB-1035,1060 ヘッドボード組み立て 補足説明書


この度は、当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。 ヘッドボードの仕様が一部変更になりましたので、ご説明させて頂きます。 何かご不明な点がございましたら、下記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。

### (1)ページ

⑦ ヘッドボードに取付金具を取り付けます。取付金具の左右をシールで確認し(®:右・心:左)、取付金具とビスの間にワッシャーを挟み、上から取付ビスを入れます。

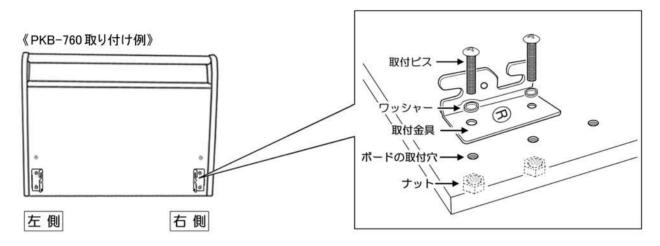

ヘッドボード裏面からナットをビスに通してスパナで固定し、 表面から、取付ビスをプラスドライバーで締めていきます。

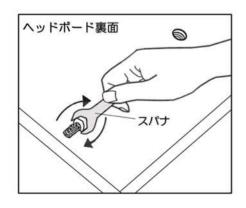



### 株式会社プラッツ

〒 816-0921 福岡県大野城市仲畑 2丁目 8-28 フリーダイヤル: 0120-77-3433